





■ Upozornění


 Nedodržení těchto bezpečnostních podmínek může způsobit poruchu zařízení nebo vaše zranění.


 NESKLADUJTE zařízení V dosahu topení nebo mikrovln. Může to způsobit poškození nebo výbuch.


 NEPOUŽÍVEJTE ani nenabíjíte zařízení, pokud je vlhké. Může to způsobit jeho popraskání, únik nadměrného tepla, příp. vznik požáru.


 NIKDY zařízení nezapínejte, když zvlhne. Může to způsobit poruchu.

 Zařízení nerozebírejte ani jej nevystavujte nárazům. Pokud jej upustíte, může pádem na podlahu dojít k jeho poškození.

 Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje jakékoliv známky poruchy.

 NIKDY neohýbejte, nezahřívajte ani nepřerušujte napájecí kabel. Může se rozbit a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

 Pokud je zařízení v provozu, neďívejte se do LED kontrolky. Váš zrak může být narušen.

 iNeck si nesundávejte, pokud je v provozu.

■ Zapnutí

- Stisknutím tlačítka na 1 sekundu se přístroj zapne a ohlásí se pípnutím.
- LED kontrolka svítí.
- Režim správy péče o pokožku se automaticky spustí do 3 sekund po zapnutí.

■ Automatické vypnutí


- Přístroj se automaticky vypne po 3 s od dokončení péče o pleť

■ Vypnutí

- Stisknutím tlačítka na 1,5 sekundu se přístroj vypne a ohlásí se pípnutím.

■ Nabíjení

- Připojte zařízení k 5V DC adaptéru pomocí USB kabelu.
- Doba plného nabití je 3 hodiny

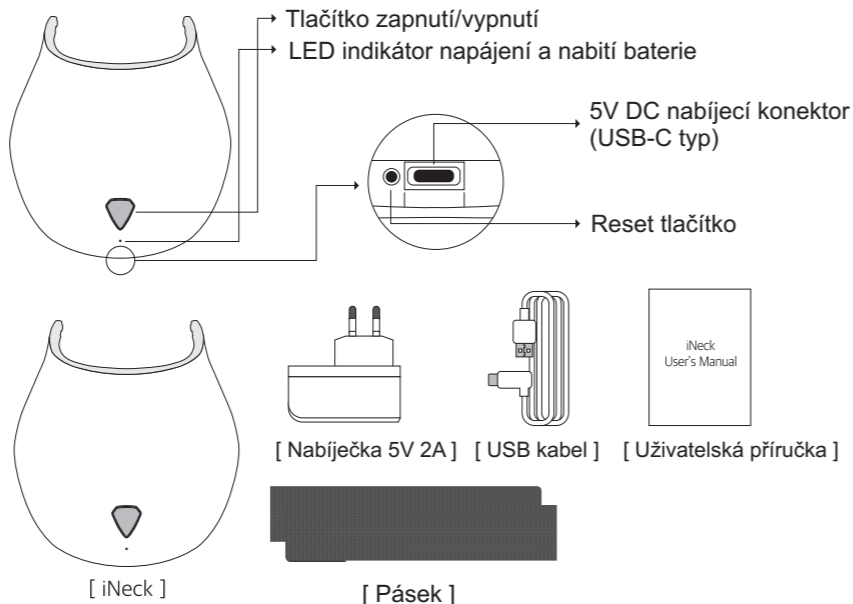

■ Přepínání režimu

- Režim Skincare se automaticky spustí po 3 sekundách od zapnutí přístroje.
- Krátkým stiskem tlačítka napájení změníte režim péče

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5
Mode 1 repeat

- Mode 1 : Červený
- Mode 2 : Zelený
- Mode 3 : Modrý
- Mode 4 : Červený + Modrý
- Mode 5 : Modrý + Červený

■ Před použitím přístroje

* Po umytí použijte základní kosmetiku



Umyjte dekolť.



Nasaďte iNeck.



Nastavte pásek tak, aby byl iNeck správně usazen.

■ Instalace aplikace & Registrace

- Stáhněte si aplikaci z Obchodu Play pro Android / App Store pro iOS.
- Obchod Play / App Store Hledat „iMask“ Instalovat



- Po spuštění aplikace budete vyzváni k registraci a zadání aktivčního čísla
- Zadejte „1 2 3 4 5 6 7 8 9 0“

• (Pozor) Minimální konfigurace smartphonu:

[Telefon s Androidem]
OS - Android 6.0 nebo vyšší
Displej - 1080 x 1920 nebo vyšší


[iPhone]
OS - iOS 11.0 nebo vyšší
Displej - 750 x 1334 nebo vyšší

■ Bluetooth připojení

- Bluetooth se aktivuje po zapnutí napájení.
- Na smartphonu v seznamu Bluetooth zařízení se zobrazí „miin-iMask Neck“
- Volbou automatického připojení se obě zařízení budou párovat bez potřeby dalšího nastavení

■ Stav nabití baterie

| | Stav nabití | LED barva | Nabíjení |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 1 | Velmi málo | Červeně bliká | Červeně bliká |
| 2 | Málo | Červená | Červeně bliká |
| 3 | Středně | Zelená | Zeleně bliká |
| 4 | Dostatečně | Modrá | Modře bliká |
| 5 | Plně | Modrá | Modrá |

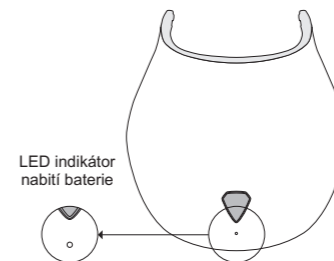

■ Záruční list

1. Tento produkt je vyroben v přísné shodě s kvalitou produktů společnosti Miinsystems co., ltd.
2. Oprava je bezplatná pouze pokud dojde k selhání zařízení při běžném používání (v záruční době)
3. Servis mimo záruční podmínky je placenou službou.

| Název | miin-iNeck | | |
|-----------------|------------|-----|--|
| Model | Artemis N | | |
| Sériové číslo | | | |
| Datum prodeje | | | |
| Adresa majitele | | | |
| Jméno majitele | | tel | |

- Informace k bezplatné opravě
V případě, že se produkt rozbije v rámci záruky, nárok na bezplatnou opravu vzniká, pokud bylo zařízení používáno v běžném prostředí.

- Opravu je nutné uhradit v následujících případech:
 - Porucha byla způsobena chybou nesprávného zacházení.
 - Porucha vznikla po uplynutí zákonné záruční lhůty
 - Porucha byla způsobena chybou zákazníka (nedbalost).
 - Porucha byla způsobena zásahem jiného servisního technika.