


LED NECK CARE
L.ma

L.ma Pokyny

Prémiová LED maska pro péči o krk

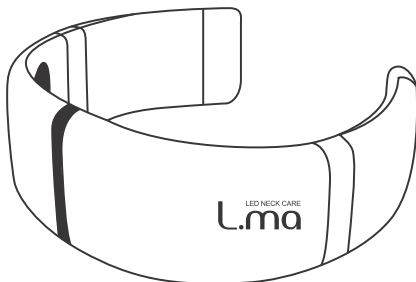

Před použitím si přečtěte „Upozornění“ a používejte masku správně.

Uchovejte si příručku, ke které má uživatel snadný přístup, kdykoli po jejím přečtení.

**Jelikož je příručka přiložena k certifikátu zabezpečení kvality,
uložte si ji pod svým jménem.**

1. Složení výrobku

2. Použití

3. Opatření pro použití

4. Opatření týkající se produktu a bezpečnosti

5. Specifikace a certifikace produktů


6. A/S a zajištění kvality

7. Kritéria řešení spotřebitelských sporů


1. Složení výrobku

L.ma zařízení pro péči o krk

Přední strana

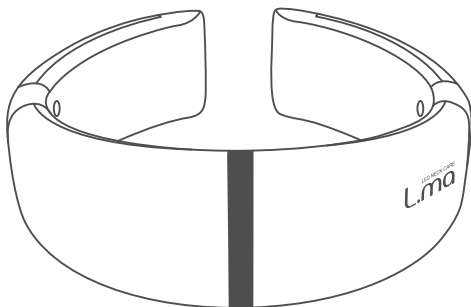


Boční strana

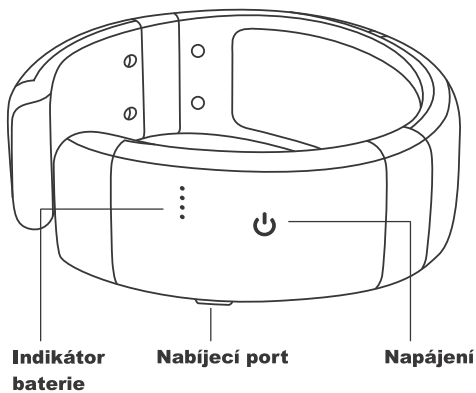

**Před použitím zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti.
Tvar skutečných součástí se může lišit od obrázků.**


Složení balíčku L.ma

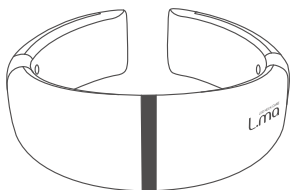


L.ma zařízení pro péči o krk




Nabíječka

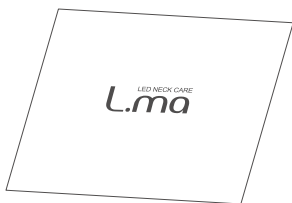

Leták

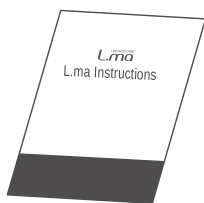

Návod k použití

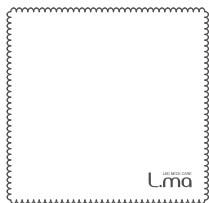


Čistič




Přenosný sáček

2. Použití


Použití s mikronáplastí

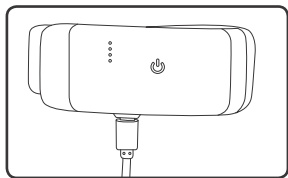


1. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu zařízení a plně jej nabijte. Když jsou rozsvícena všechna čtyři světla, zařízení je plně nabitě.

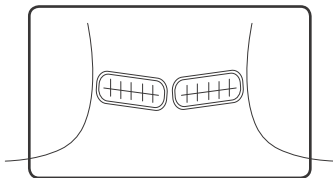


2. Po vyčištění připevněte náplast na požadované místo.

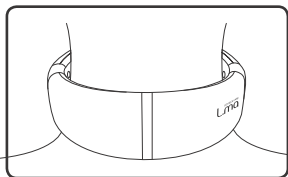


3. Nasadte si zařízení jemným natažením a ujistěte se, že LED světlo je na přední straně krku. (Dávejte pozor, abyste to příliš neroztáhli)

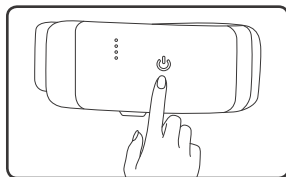

4. Stiskněte tlačítko napájení na 1 sekundu, aby se zařízení zapnulo. Pokud je zařízení zapnuté, při stisknutí během 0,1 až 1 sekundy, se režim změní. (celkem má zařízení 5 režimů)

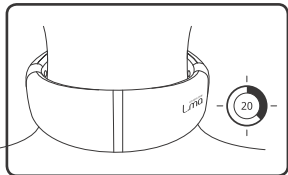

5. LED světlo se automaticky vypne po 20 minutách. Po sundání zařízení náplast po 2 hodinách sejměte nebo také může pomoci hluboký spánek.

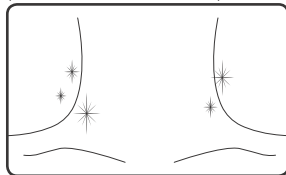


6. Druhý den po odstranění náplasti oblast jemně omyjte. Doporučuje se používat zařízení po dobu 5 až 20 minut 3 až 4krát týdně nebo déle. Pro intenzivní péči můžete používat každý den.


• Použití náplasti

Doporučuje se používat mikro náplast 2 až 3krát týdně po dobu 2 hodin nebo déle.


Použití se základními produkty pro péči o pleť

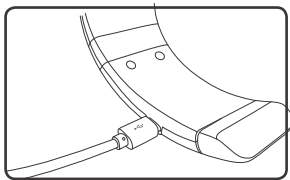


1. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu zařízení a nabíjте baterii.

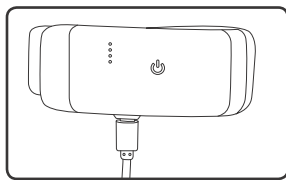


2. Při plném nabití se rozsvítí všechna čtyři světla.

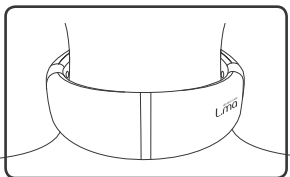


3. Po vyčištění noste zařízení na suchém krku (nebo na něj naneste produkt pro péči o pleť). Ujistěte se, že LED světlo je na přední straně krku.

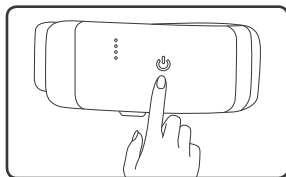

4. Stisknutím tlačítka napájení na 1 sekundu spustíte provoz zařízení. Pokud je zařízení zapnuté, při stisknutí během 0,1 až 1 sekundy, se režim změní. (celkem má zařízení 5 režimů)

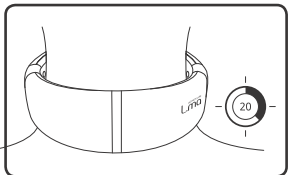

5. LED světlo se automaticky vypne po 20 minutách.

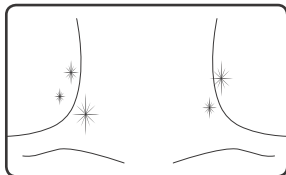

Doporučuje se používat zařízení po dobu 5 až 20 minut 3 až 4krát týdně nebo déle. Pro intenzivní péči můžete používat každý den.

• Režimy•

Multi-Mode (Total Care) – Red Mode – Blue Mode – Red + NIR Mode – Pink Mode

3. Opatření pro použití

Obecná bezpečnostní opatření

➤ Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny a bezpečnostní opatření a použijte jej poté, co porozumíte jeho používání.

➤ Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu.

Výrobce neodpovídá za poškozený nebo nefunkční výrobek způsobený nesprávným použitím nebo nedodržením bezpečnostních opatření.

- **Tento výrobek je kosmetický přístroj, nikoli zdravotnický**
- **Pokud výrobek používají děti nebo lidé s omezenými fyzickými, mentálními nebo intelektuálními schopnostmi, musí vyhledat pomoc opatrovníka (popř. zákonného zástupce)**

Opatření ohledně nabíjení a doby používání

- **Když je produkt připojen k nabíječce, LED dioda (úroveň nabití) zčervená.**

- **Při používání nebo nabíjení produktu může v zástrčce dojít k mírnému zahřátí.**

➤ Je-li nabíječka zapojena, když je v provozu, kontrolka může jednou bliknout, než začnete pracovat.

- **Pokud použijete výrobek třikrát nebo vícekrát za sebou, může se povrchová teplota v důsledku nepřetržitého tepla zvyšovat, takže před každým druhým použitím počkejte asi 10 minut.**

Opatření v závislosti na vlastnostech pokožky
(Opatření před použitím výrobku)

- Pro jednoznačný účinek se doporučuje používat zařízení déle než 2 měsíce. Účinek se může lišit v závislosti na individuálních odlišnostech pokožky.

Pokud máte chronické kožní onemocnění (seborea, alergie, lupénka atd.) nebo kožní onemocnění s konkrétním stavem kůže, poraďte se před použitím s dermatologem.

Pokud jste podstoupili lékařské ošetření, zákrok nebo operaci, poraďte se před použitím se svým lékařem.

- V případě hnisavého akné se příznaky mohou někdy zhoršit, proto prosím použijte zařízení po zlepšení pleti.

Opatření v závislosti na vlastnostech pokožky
(Opatření po použití výrobku)

- Blízké infračervené paprsky nejsou pro lidské tělo vůbec škodlivé, ale pokud se během používání objeví kožní abnormality (svědění atd.) nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte zařízení používat a poraďte se s dermatologem.

V případě citlivé pokožky můžete během používání zaznamenat silné zarudnutí nebo suchost v oblasti krku. V takovém případě snižte počet a dobu používání.

Při používání výrobku můžete pociťovat mírný pocit tepla.

(Pokud cítíte nadměrné teplo, přestaňte zařízení používat a kontaktujte webovou stránku L.ma.)

‘L.ma webová stránka’
www.lmashop.com

4. Opatření týkající se produktu a bezpečnosti

Opatření týkající se produktu

-Pokud se do výrobku dostane vlhkost, může to způsobit poruchu.

Před použitím produktu co nejvíce osušte požadovanou oblast péče o pleť.

-Dávejte pozor, abyste nabíjecí kabel neohýbali, nekroutili, nezahřívali nebo nepoškozovali.

Pokud je výrobek svévolně opraven, rozebrán nebo předělán, bezplatná služba opravy není k dispozici bez ohledu na záruční dobu.

-Na výrobek nepoužívejte nadměrnou sílu a neupustěte jej.

-K čištění produktu nepoužívejte vodu, alkohol, benzín ani čisticí prostředky.

-Nepoužívejte výrobek v poškozeném stavu.

-Pokud u produktu pocítíte jakékoli jiné abnormality, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte webovou stránku L.ma.

Bezpečnostní opatření

[Obecné podrobnosti]

- **Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.**
- **Před použitím výrobku si sundejte příslušenství, jako je náhrdelník a náušnice.**

-Buďte opatrní, protože existuje riziko poškození zraku a suchého oka, když LED světlo svítí přímo do očí.

- **Nevkládejte výrobek do úst.**

[Související s úrazem elektrickým proudem]

- Nedotýkejte se výrobku a adaptéru mokrou rukou.

- **Před zapojením do zásuvky zkontrolujte, zda je nabíjecí terminál čistý, a nezapojujte jej do jiné zásuvky, než je uvedené napětí.**

- **Při odpojování zástrčky ze zásuvky tahejte za napájecí kabel opatrně suchýma rukama.**


- **Do blízkosti zařízení neumísťujte žádné tekuté výrobky jako je voda, káva nebo nápoje. Pokud produkt zvlhne, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte webovou stránku L.ma.**

[Související s požárem]

- Do blízkosti výrobku neumísťujte hořlavé látky.

-Nezahřívejte všechny součásti, jako je hlavní tělo a adaptér, ani je nedávejte do ohně. Zařízení také nepoužívejte ani neskladujte při vysoké teplotě (ohřívač, elektrická přikrývka, sporák atd.).

5. Specifikace a certifikace produktu

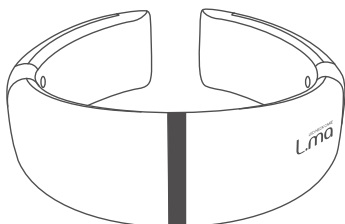

Jméno modelu	L.ma LED Neck Care
Příkon	5V / 1A
Vestavěná baterie	3.7V / 600mAh
Hmotnost	130g
Velikost	138mm X 122mm X 48mm
Výrobce	VITSRO Co., Ltd.
Země výroby	Republic of Korea

Provozní teplota: 0-35°C

Doporučená teplota: 15-30°C

Skladovací teplota: -10-40°C



Číslo certifikace elektrické bezpečnosti
HH10253-14010F

Ověřovací číslo elektromagnetické kompatibility
R-R-VT9-Lma

6. A/S a záruka

Chcete -li získat uspokojivý servis, musíte při žádosti o opravu předložit záruku spolu s datem nákupu.

1. Záruka na výrobek se vztahuje na jeho výhody uvedené v záruce.
2. Záruční doba je 12 měsíců od data nákupu.
3. Záruku nelze znovu vystavit.

[Informace o bezplatné službě]

V případě poruchy do jednoho roku od nákupu poskytneme bezplatný servis, pokud předložíte výrobek a záruku v souladu s návodem k použití.

[Informace o placených službách]

Záruku bezplatné opravy nelze poskytnout v následujících případech.

- 1) V případě poruchy nebo poškození způsobeného nedodržením pokynů
- 2) Vady způsobené nesprávnou opravou, rozebráním nebo úpravou výrobku
- 3) V případě náhodného poškození během používání, jako je úmyslné upuštění na podlahu nebo ponechání výrobku bez dozoru.
- 4) V případě přírodních katastrof, jako je požár, zemětřesení a povodeň
- 5) Vady způsobené nesprávným použitím

----- ✂

Tento certifikát je skutečnou zárukou kvality vydanou společností VITSRO Co., Ltd.

~~~~~ Zajištění kvality



|               |        |                |  |
|---------------|--------|----------------|--|
| Jméno výrobku |        | Jméno modelu   |  |
| Datum nákupu  |        | Záminka nákupu |  |
| Zákazník      | Jméno  | Kontakt        |  |
|               | Adresa |                |  |
| Číslo výrobku |        |                |  |

## 7. Standardy řešení spotřebitelských sporů

| <b>Druh poškození spotřebitele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | <b>Podrobnosti o odměně</b>                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | <b>V záruční době</b>                                            | <b>Po záruční době</b> |
| <b>Selhání výkonu nebo funkce z důvodu úmyslné nedbalosti spotřebitele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pokud je možná oprava</b>   | <b>Placená oprava</b>                                            | <b>Placená oprava</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pokud je oprava nemožná</b> | Po vyzvednutí částky ekvivalentní placené opravě produkt vyměňte | -                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- V případě poruchy v důsledku přírodních katastrof (požár, poškození solí, plyn, zemětřesení, poškození větrem a povodní, blesky atd.)</li> <li>- V případě poruchy v důsledku abnormálního napájení nebo vadného připojovacího zařízení</li> <li>- V případě poruchy v důsledku opravy nebo úpravy v servisním středisku nebo na jiném místě, než je místo určené autorizovaným servisem</li> <li>- Při výměně spotřebních dílů, které se během používání běžně opotřebovávají</li> <li>- V případě vnější příčiny se nejedná o vadu jiného výrobku</li> </ul> |                                | <b>Placená oprava</b>                                            | <b>Placená oprava</b>  |



| <b>Druh poškození spotřebitele</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                           | <b>Podrobnosti o kompenzaci</b>                |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | <b>V záruční době</b>                          | <b>Po záruční době</b>                                                    |
| <b>V případě poruchy výkonu nebo funkce, ke které došlo za normálních podmínek používání, porucha funkce nebo funkce, ke které došlo za normálních podmínek používání</b> | <b>Kritické opravy nutné do 10 dnů od nákupu</b>                                                                          | Výměna produktu nebo vrácení kupní ceny        | <b>Placená oprava</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                           | <b>Kritické opravy nutné do jednoho měsíce od nákupu</b>                                                                  | Výměna produktu nebo bezplatná oprava          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <b>V případě, že vyměněný výrobek vyžaduje důležité opravy v rámci jedné reklamace</b>                                    | Vrácení kupní ceny                             |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <b>Když výměna není možná</b>                                                                                             |                                                |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <b>V případě závady</b>                                                                                                   | Oprava zdarma                                  |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <b>Opraveno pro stejnou závadu, ale porucha se opakuje (potřetí)</b>                                                      | <b>Výměna produktu nebo vrácení kupní ceny</b> | <b>Vrácení peněz přidáním 10% z kupní ceny k částce paušálního odpisu</b> |
|                                                                                                                                                                           | <b>Byly přijaty celkem 4 opravy kvůli poruše několika částí, ale porucha se opakuje (po 5.)</b>                           |                                                |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <b>Když oprava není možná</b>                                                                                             |                                                |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <b>Když je oprava nemožná, protože nemáte díly k opravě</b>                                                               |                                                |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | <b>Ztratí-li provozovatel podniku produkt, který požaduje zákazník opravit nebo pokud není dodán déle než jeden měsíc</b> |                                                |                                                                           |
| <b>Poškození vzniklé během procesu přepravy a instalace produktu při nákupu výrobku</b>                                                                                   | <b>Výměna produktu</b>                                                                                                    |                                                |                                                                           |

※ Výše uvedená bezplatná záruční lhůta a standardy náhrad jsou založeny na standardech řešení spotřebitelských sporů oznámených Komisí pro spravedlivý obchod.

※ Pokud dojde ke sporu ohledně jakýchkoli blíže neurčených záležitostí nebo předpisů, budou se řídit standardy řešení spotřebitelských sporů.

※ Pokud výrobek nefunguje správně, mohou být účtovány servisní poplatky, proto si přečtěte uživatelskou příručku.

※ Díly, které mají být během opravy vyměněny, mohou být díly jiného původu nebo výrobce než stávající díly a nemusí se jednat o nové díly, ale fungují normálně a jsou použity díly, které jsou funkčně ekvivalentní. Některé části použité ve výrobku mohou být vyrobeny v jiné zemi, než ve které byl vyroben.

※ V případě výměny nebo vrácení peněz z důvodu nežádoucích účinků je vyžadováno potvrzení od lékaře a poznámky atd.

L.ma ONLINE domovská stránka

L.ma's Oficiální domovská stránka

**[www.lmashop.com](http://www.lmashop.com)**

Pokud používáte online službu, najdete různé průvodce.  
Je to pohodlnější použití.

LED NECK CARE  
**L.ma**