


— PREMIUM LED FACE MASK —

## L.ma LED Face Mask – uživatelská příručka

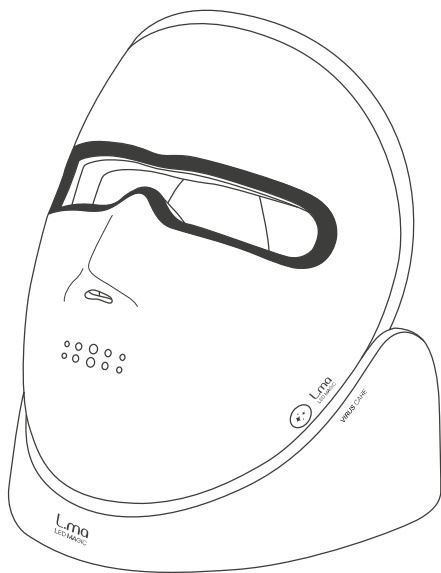

- \* Před užitím je nutné nastudovat veškeré pokyny z této příručky
- \* Tuto příručku po přečtení nelikvidujte, uchovejte ji pro další použití
- \* Nevyhazujte ani další tištěné materiály, především certifikát kvality.

# Obsah

## 00. Bezpečnostní informace

### 01. Opatření pro bezpečnost pokožky

- 1) Zákazy týkající se bezpečnosti pokožky
- 2) Informace k bezpečnosti pokožky
- 3) Konzultace s odborníky

### 02. Opatření pro bezpečnost produktu

- 1) Varování týkající se bezpečnosti produktu
- 2) Opatření týkající se bezpečnosti produktu

### 03. Bezpečnostní opatření pro používání produktu

- 1) Varování k používání produktu
- 2) Varování a upozornění týkající se adaptéru
- 3) Varování a upozornění týkající se baterie
- 4) Varování a upozornění týkající se umístění produktu

### 04. Popis produktu

- 1) Unikátní vlastnosti tohoto zařízení
- 2) Popis jednotlivých částí
- 3) Specifikace zařízení
- 4) Konstrukce zařízení

### 05. Ja používat produkt

- 1) Pokyny a opatření pro LED masku / kolébku L.ma
- 2) Jak používat L.ma LED Face Mask
- 3) Jak připevnit L.ma LED Face Mask
- 4) Jak řídit L.ma LED Face Mask
- 5) Jak nabíjet a skladovat L.ma LED Face mask

### 06. FAQ – často kladené dotazy

### 07. Řešení problémů

- 1) Před nahlášením poruchy zkontrolujte
- 2) Zajištění kvality

### 08. Související služby

- 1) Kriteria řešení spotřebitelského sporu
- 2) Zpoplatněné služby
- 3) Služby zákazníkům

## 00 Bezpečnostní informace

Vysvětlení symbolů použitých v příručce.

Informace jsou rozdělené do tří kategorií: Poznámka / Upozornění / Varování. Zobrazení se u nich symboly vykřičníku.

Takto označené části si musíte pečlivě přečíst a dodržovat je, vyhněte se tím potenciálnímu nebezpečí.

### Poznámka

Upozorňuje na poznámku k funkci

### Upozornění

Označuje preventivní opatření pro operace, které mohou způsobit drobná zranění či poškození produktu

### Výstraha

Indikuje nebezpečí, které může způsobit zranění nebo zničení produktu

\* Tato uživatelská příručka je napsána na základě aktuálních specifikací produktu, takže se její obsah může lišit. Příručky ke všem specifikacím a funkcím se mohou měnit v závislosti na specifikaci a dalších okolnostech výrobce.

## 01 Opatření pro bezpečnost pokožky

### Zákazy týkající se bezpečnosti pokožky

- 1) Nedoporučuje se používání během těhotenství, menstruace a kojení (Hormonální změny mohou způsobovat přecitlivělost pokožky.)
- 2) Nedoporučuje se pro osoby s fotosensitivními poruchami, např. alergie na sluneční paprsky
- 3) Nedoporučuje se použití po absolvování sauny, opalování, peelingu a dalších činností, při nichž byla pokožka vystavena stresu.
- 4) nedoporučuje se používání v případě že podstupujete léčbu, která způsobuje vysoušení pokožky.

### Informace k bezpečnosti pokožky

- 1) Pokud jste v posledních 2 měsících absolvovali procedury související s pokožkou, plastickou chirurgií, vypadáváním vlasů atd., Konzultujte použití s odborníkem.
- 2) Uchovávejte mimo dosah dětí a kojenců, zamezte jejich kontaktu se zařízením.
- 3) Pokud během používání pocítujete potíže s dýcháním, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.
- 4) Během provozu se neďivejte přímo na LED světlo. Nadměrné vystavení světlu může poškodit zrak.
- 5) Během procedury nepoužívejte brýle ani kontaktní čočky.
- 6) Před použitím sundejte veškeré kovové předměty z těla, které by mohly přijít do styku s přístrojem.

## 01 Opatření pro bezpečnost pokožky

### ⓘ ⓘ ⓘ Potřeba konzultace s odborníkem

- 1) Pokud u vás probíhá onkologické nebo kardiovaskulární onemocnění, abnormality endokrinního systému, senzorycké abnormality nervového systému, infekční onemocnění, onemocnění jater atd., konzultujte používání s odborníkem.
- 2) Pokud trpíte neobvyklými kožními chorobami (kopřivka, bradavice, milia atd.), musíte se poradit s odborníkem.
- 3) Pokud máte neobvyklé oční onemocnění (katarakta, glaukom, konjunktivitida, atd.) nebo jste prodělali chirurgický zákrok (laser, atd.), musíte se poradit s odborníkem.
- 4) Pokud máte onemocnění související se štítnou žlázou, konzultujte používání s odborníkem.
- 5) Pokud jste podstoupili jakoukoliv plastickou operaci, konzultujte používání s odborníkem.
- 6) Pokud se vaše pokožka dočasně změnila vlivem okolního prostředí a dalších vnějších faktorů, doporučuje se omezit používání, dokud se původní stav nevrátí, nebo konzultace s odborníkem.
- 7) Při používání tohoto zařízení mohou nastat různé typy podráždění pokožky v závislosti na individuální kondici pokožky. V takovém případě snižte frekvenci použití.

## 02 Opatření pro bezpečnost produktu

### ⓘ ⓘ ⓘ Výstraha týkající se bezpečnosti produktu

- 1) Zabraňte mechanickému poškození a zařízení nezatěžujte nadměrnou hmotností.
- 2) Nepřipojujte napájecí šňůry více produktů do jedné zásuvky současně, přehřátí zásuvky může způsobit požár.
- 3) Při přemísťování zařízení vždy odpojte napájecí kabel a všechny připojené kabely

### ⓘ ⓘ ⓘ Upozornění týkající se bezpečnosti produktu

- 1) Nenabíjejte zároveň masku i kolébku
- 2) Mírné zahřívání masky během provozu je v pořádku
- 3) Pokud je s přístrojem něco v nepořádku, přestaňte jej používat.

## 03 Bezpečnostní opatření pro používání produktu

### ⓘ ⓘ ⓘ Výstraha k používání produktu

- 1) Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Hrozí nebezpečí požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění v důsledku nesprávné funkce.
- 2) Protože toto zařízení obsahuje magnetické kovy, může nepříznivě ovlivnit předměty v blízkosti, jako jsou kreditní karty a kardiostimulátory, buďte proto opatrní.
- 3) Nemanipulujte se zařízením, pokud máte mokré ruce. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- 4) Nenechávejte zařízení spadnout, nevystavujte jej nárazům a udržujte je mimo dosah míst se silnými vibracemi nebo magnety.
- 5) Při manipulaci s kabelem, za kabel netahejte.
- 6) Při použití v suchém prostředí buďte opatrní, protože by to mohlo způsobit statickou elektřinu.
- 7) V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte hořlavé látky.
- 8) Nepoužívejte v blízkosti zařízení jiné zařízení, které používá vysokonapěťovou elektřinu.

### 03 Bezpečnostní opatření pro používání produktu

#### Výstrahy k napájecímu adaptéru

- 1) Během nabíjení nepokládejte zařízení na deku nebo elektrickou deku. Zvýšení vnitřní teploty může způsobit poruchu nebo oheň.
- 2) Pokud cítíte kouř nebo neobvyklý zápach, vypněte napájení, odpojte nabíjecí adaptér.

#### Upozornění k napájecímu adaptéru

- 1) Nepoškozujte, nenamáhejte, neohýbejte, neotočte ani nezahřívajte napájecí adaptér a USB kabel. Poškození kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem.
- 2) Nezasunujte žádný vodič (hřebík, šroubovák) , do drážky na druhém konci, když je nabíjecí adaptér připojen do zásuvky. Nedotýkejte se nabíjecího adaptéru ihned po jeho vyjmutí ze zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- 3) Při vyjímání nabíjecího adaptéru ze zásuvky držte tělo nabíjecího adaptéru a vytáhněte jej. Držení za kabel může způsobit poškození nebo zkrat.
- 4) Nabíjecí kolébku neponořujte do vody ani nečistěte.
- 5) Ujistěte se, že používáte originální nabíjecí adaptér. Pokud použijete jiný nabíjecí adaptér, může to způsobit neopravitelnou poruchu.

#### Výstrahy a upozornění týkající se baterie

- 1) Pokud je baterie poškozena, riskujete nebezpečí výbuchu. Výrobek nevystavujte otřesům, nedávejte jej do vody ani jej dlouho neuchovávejte v autě nebo na jakémkoliv vyhřátém místě. Vestavěná baterie nelze vyjmout ani vyměnit bez odporného servisního zásahu. Nevyhazujte baterii do směsného odpadu, postupujte podle místních předpisů postupu při likvidaci elektromateriálu.
- 2) Pokud cítíte kouř nebo zvláštní zápach, přestaňte zařízení používat, vypněte napájení, odpojte nabíjecí adaptér.

#### Bezpečnostní opatření týkající se baterie

- 1) Jelikož má tento produkt zabudovanou baterii, před prvním použitím po zakoupení ji plně nabijte.
- 2) Jelikož se baterie řadí mezi spotřební materiál, její použitelná doba při delším používání postupně klesá.
- 3) Baterii nelze jednoduše vyjmout nebo vyměnit, v případě potřeby využijte k tomuto úkonu zákaznické centrum.
- 4) Výměna baterie je servisní služba za poplatek.

#### Informace k nabíjení baterie

Čas do úplného nabití: 3 hodiny  
Spotřeba energie při nabíjení: 5 W.

## 03 Bezpečnostní opatření pro používání produktu

### ⚠️⚠️⚠️ Výstrahy ke skladování zařízení

- 1) Zařízení neuchovávejte na místech s přímým slunečním zářením nebo teplých místech, jako je topení. Existuje riziko požáru.
- 2) Neskladujte na místech, která vytvářejí teplo, například elektrický ohříváč. Mohlo by dojít k poruše nebo požáru.
- 3) Neskladujte v prašném a vlhkém prostředí.

### ⚠️⚠️ Upozornění ke skladování zařízení

- 1) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
- 2) Neskladujte zařízení ve vysokých teplota (35 °C nebo vyšší) ani v nízkých teplotách (5 °C nebo nižší) nebo na vlhkém místě.

### ⓘ Informace ke skladování zařízení

- 1) Chraňte zařízení před vodou
- 2) Neumísťujte kabel blízko horkého povrchu.
- 3) Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, nabijte baterii alespoň jednou za tři měsíce pro zachování životnosti baterie.
- 4) Chraňte zařízení před poškozením ostrými kovovými předměty, jako jsou klíče, vlásenky, náhrdelníky, nehty atd.
- 5) Zařízení skladujte v originálním obalu a pokud je třeba produkt přepravovat, zabalte jej do krabice.
- 6) Neskladujte zařízení v blízkosti těkavých kapalin.
- 7) Dlouhodobě neskladujte zařízení v blízkosti plastové nebo gumové výrobků.
- 8) Při čištění produktu používejte měkký suchý hadřík. Pokud je povrch znečištěný, otřete pouze kontaminovanou oblast. Nepoužívejte silné chemikálie, jako je alkohol, benzen nebo ředidlo, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- 9) Zařízení nevkládejte do myčky, trouby nebo pračky.

## 04 Popis produktu

### Unikátní vlastnosti produktu

#### L.MA CURE LIGHT


: Světlo proniká na povrch kůže a pomáhá zlepšit pružnost a tón s vlnovou délkou vhodnou pro různé typy kůže. Je užitečné při zmírnění příznaků, jako je rýma a zánět vedlejších nosních dutin.

#### Bezpečnost L.MA CURE LIGHT


: Technologie je navržena tak, aby zabránila průniku světla do oční bulvy. Můžete také upravit nastavení tak, aby co nejvíce vyhovovalo každému obličej.

### Jednotlivé části

#### 1) Maska

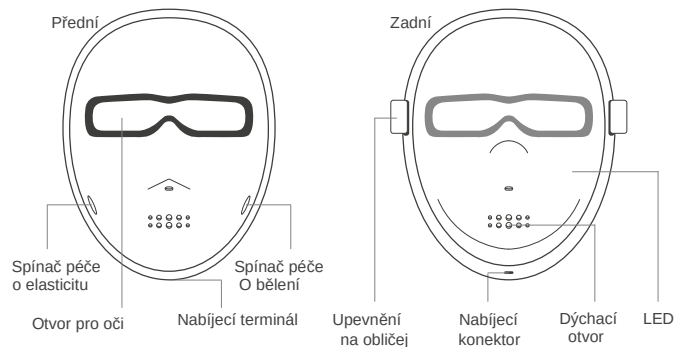

#### 2) Kolébka

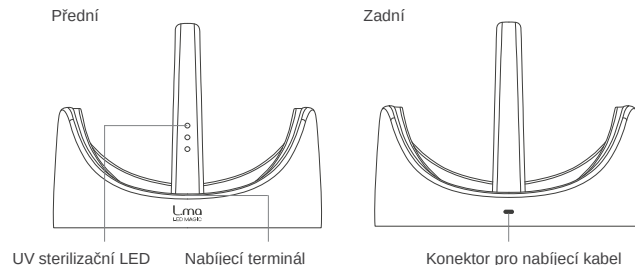

## 04 Specifikace produktu

### Specifikace produktu

Název produktu	L.MA LED FACE MASK
Jméno zařízení	LED FACE MASK
Model	BTLMAF01
Vstupní napětí	5V/1.2A
Baterie	3.7V/900mAh/3.33Wh
Rozměry	192.2*248.2*121.2(mm)
Hmotnost	360g
Výrobce / Stát	VITSRO Co., Ltd./Republic of Korea


Název produktu	UV LED sterilization charging cradle
Jméno zařízení	LED MASK CRADLE
Model	BTLMAF01-C
Vstupní napětí	5V/1.2A
Rozměry	220.4*203*196.6(mm)
Hmotnost	440g
Výrobce / Stát	VITSRO Co., Ltd./Republic of Korea

Registrační číslo certifikace KC (elektromagnetické zařízení) : R-R-VT9-L.ma-F


Číslo osvědčení o elektrické bezpečnosti (adaptér): HH10253-14010F

Osvědčení o registraci shody (adaptér): MSIP-REM-sho-SH-1205C


### Obsah balení

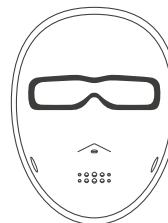

L.MA LED FACE MASK

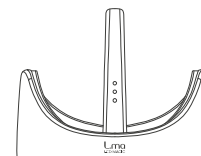

UV LED sterilization charging cradle

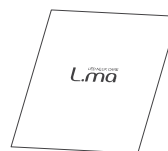


Informační leták



Uživatelská příručka



Čistič

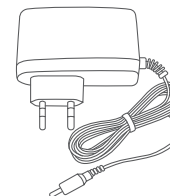

\* Nabíječka se prodává samostatně.

Před použitím zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti.  
Reálný tvar produktu se může lišit od obrázku.

## 05 Používání produktu

### Popis jednotlivých vlnových délek masky

Žluté světlo (585 nm): Zlepšuje redukci zarudnutí a bělení pokožky.

Červené světlo (660 nm): Redukuje pórovitost pokožky.

Léčebné světlo 1 (830nm): Zlepšuje tón pleti.

Léčebné světlo 2 (940nm): Zlepšuje příznaky zánětu a uleví od bolesti při rinitidě, sinusitidě

### ⚠️ ⚠️ Upozornění k používání produktu

- 1) Nedívejte se na provozní LED světlo zblízka.
- 2) Nepoužívejte masku s brýlemi ani kontaktními čočkami


### ⓘ Informace k používání produktu

- 1) Před použitím zařízení se ujistěte, že je dostatečně nabitě.
- 2) Při používání tohoto zařízení může dojít k podráždění pokožky v různých formách v závislosti na individuálním stavu pokožky. V případě podráždění, upravte počet a dobu použití.
- 3) Pokud s maskou LED začínáte, doporučujeme ji používat třikrát týdně po 5 minutách, pak je možné dobu a frekvenci postupně zvyšovat.


### Jak používat LED masku




Po ošetření pleti tonerem a krémem naneste L.ma EGCG + Rejuve Ampuli, jemně promasírujte kvůli absorpci.

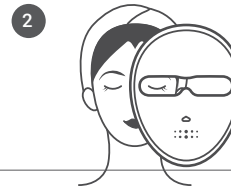

Pomocí otočného knoflíku nastavte pásek tak, aby odpovídal obvodu a správně seděl na obličeji, především v oblasti očí a nosu.  
Utahování pásku: doprava.  
Uvolnění pásku: doleva

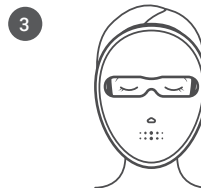


Stisknete tlačítko napájení (Total Care / vpravo) a vyberte režim. Nebo stisknete tlačítko Cure Care (vlevo) přičemž Napájecí tlačítko bude sloužit k volbě režim péče o vaši pokožku.

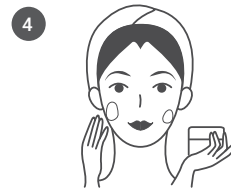

Časovač je nastaven Automaticky; Po skončení procedury použijte L.ma Vera Rejuve Cream, Finalizujete tím hydrataci pokožky.


Režim Multi: 15 minut  
Režim Single: 9 minut

### Jak nasadit L.ma LED Mask

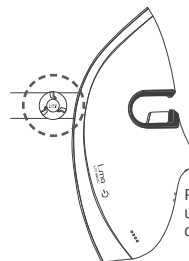

1

Po nasazení otočíte utahovacím knoflíkem, dokud maska nebude správně sedět

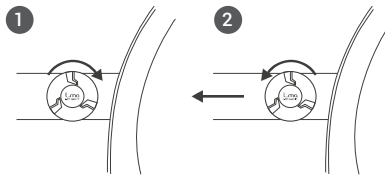

2

Po skončení procedury pásek povolte otočením v opačném směru.



## 05 Používání produktu

Jak L.ma LED Face Mask pracuje



- 1) Stisknutím tlačítka napájení na pravé straně zařízení zapnete.
- 2) Dlouhým stisknutím delším než 1 sekundu vypnete, krátkým stisknutím méně než 1 sekundu měníte režim. Časovač se spustí automaticky.  
(Multimode 15 minut / Single-mode 9 minut)

\*\* Pokud v Cure Care stisknete tlačítko napájení, vrátí se do režimu Total Care.

- ① Multi-režim (15 minut): bělení-pružnost -celková péče o pleť (5 minut každý)
- ② Režim elasticity (9 minut): Červené světlo (660 nm)
- ③ Režim bělení (9 minut): Žlutá + Cure světlo (585 + 830 nm) / inteligentní zlepšení tónu pleti
- ④ Celkový režim (9 minut): Žluté + červené světlo (585 + 660 nm) / tón pleti a zlepšení elasticity




- 1) Při zapnutém napájení (TOTAL CARE) stiskněte levé tlačítko CURE CARE
- 2) Krátký stisk do 1 sekundy mění režimy. Časovač se spouští automaticky.  
(Multimode 15 minut / Single mode 9 minut)

\* Pokud v Cure Care stisknete tlačítko napájení, vrátí se do režimu Total Care.

- ① Režim intenzivního bělení (9 minut): Žluté světlo (585 nm) / zlepšuje tón pleti
- ② Režim intenzivního zánětu (9 minut): Červená + Cure světlo (660 + 940nm) / rýma, úleva od zánětu nosních dutin
- ③ Nasolabiální režim (9 minut): Červené světlo (660 nm) / zvyšuje pružnost, redukuje vrásky


Nabíjení a skladování L.ma LED face masky

1) Nabíjení pomocí kabelu

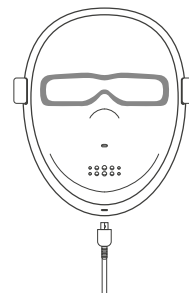


- ① Připojte nabíječku k nabíjecímu portu uvnitř bradové části masky kabelem USB typu C.
- ② Připojte nabíječku do zásuvky
- ③ Během nabíjení je oblast zbývajícího nabití do plného stavu indikovaná blikáním

2) Nabíjení a UV LED sterilizace v kolébce

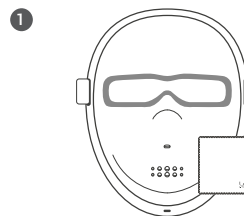


Po použití masky vyčistíte její vnitřek příloženým čističem.

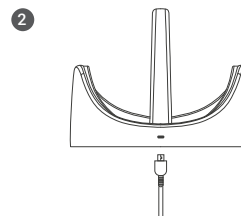

Připojte kabel USB-C k zadnímu portu kolébky.



Zkontrolujte správné usazení masky v kolébce.

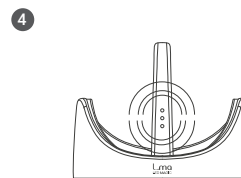

Připojte nabíječku do zásuvky nabíjete a sterilizujete pomocí UV LED.

## 06 Často kladené otázky

O: Jakou kosmetiku mám používat při používání masky?

Po vyčištění obličeje naneste základní kosmetiku, nebo použijte L.ma EGCG + Rejuve Ampuli. Po použití LED masky naneste hydratační krém L.ma Vera Rejuve.

- ⓘ Pamatujte, že při používání kosmetiky obsahující následující složky může být účinek snížen: Upravený alkohol, opalovací krém, retinol, olej atd.

O: Co mám dělat, když mám pleť příliš suchou?

Snižte frekvenci používání a po proceduře vždy použijte hydratační krém. Pokud užíváte léky, poraďte se se svým lékařem o tom, zda nemohou způsobovat vysychání pokožky.

O: Jaká je doporučená frekvence a trvání procedury?

V ideálních podmínkách je doporučeno jednou denně 5-20 minut péče. Nedoporučuje se používat více než jednou denně. Počet procedur a dobu trvání lze snížit v závislosti na stavu pokožky.

O: Mám masku používat se zavřenýma očima?

Není to nutné, maska je bezpečná, je ale nejlepší zavřít oči, odpočinout si a uvolnit se.

O: Jak mám pečovat o LED masku?

LED masku otírejte pomocí přiloženého čističe. Při znečištění otřete pouze kontaminovanou oblast s mokrým hadříkem.

### TIP!

Další dotazy a různé informace týkající se L.ma LED FACE MASK najdete na webových stránkách ([www.lmashop.com](http://www.lmashop.com)).

## 07 Řešení problémů

Před hlášením poruchy nejprve zkontrolujte:

- 1) Produkt nefunguje správně.
  - ① Zkontrolujte, zda je správně stisknuto tlačítko napájení.
  - ② Nabíjejte toto zařízení podle pokynů v uživatelské příručce.
  - ③ Při nabíjení této jednotky zkontrolujte stav baterie jednotky indikátor by měl svítit
- 2) Produkt se nezapne.
  - ① Pokud je baterie vybitá, nabijte ji.
  - ② Připojte nabíjecí adaptér k napájecímu zdroji.
  - ③ Ujistěte se, že nabíječka funguje.
  - ④ Připojte nabíječku k masce a zkontrolujte, zda funguje.
- 3) Produkt generuje příliš mnoho tepla.
  - ① Během nabíjení se dočasně vytváří teplo kvůli velkému proudící elektřiny. S postupným navyšováním kapacity baterie teplota klesá.
  - ② Jedná se o přirozený pocit tepla, ke kterému dochází při provozu.
  - ③ Pokud je teplota příliš vysoká nebo neklesá, kontaktujte zákaznický servis.
- 4) Při nabíjení se kontrolka nabíjení nerozsvítí.
  - ① To je v pořádku, kontrolka nabíjení se nerozsvítí okamžitě. Záleží na Stavu nabití baterie.

## Záruční list

Tento certifikát je zárukou skutečné kvality výrobku společnosti VITSRO Co., Ltd.

Název produktu			
Datum zakoupení		Místo zakoupení	
Jméno kupujícího		Kontakt	
Adresa kupujícího			
Sériové č.			

Pokud požadujete opravu v rámci záručního servisu, musíte předložit tento vyplněný záruční list.

- 1) Záruka na tento produkt je poskytována dle informací v této příručce.
- 2) Záruční doba pro bezplatnou opravu se počítá od data nákupu. Pokud není dostupné datum nákupu, předpokládá se datum nákupu Nahrazeno datem výroby s přičtenými třemi měsíci jako běžnou dobu od výroby do zakoupení produktu.
- 3) Záruku nelze prodloužit ani obnovit.
- 4) V případě dodávky zboží na základě samostatné smlouvy je záruka aplikována dle této smlouvy.

Zaregistrujte zakoupený produkt na webových stránkách a služby spojené s řešením problémů získáte rychleji a spolehlivěji.

## Standardy řešení spotřebitelských sporů

Druh poškození		Detaily o kompenzaci	
		V záruční lhůtě	Po uplynutí záruční lhůty
V případě poruchy výkonu nebo funkce při dodržení standardních podmínek užívání	Závažné poruchy 10 dní od nákupu	Výměna produktu nebo vrácení kupní ceny	Placená oprava
	Závažné poruchy do jednoho měsíce od nákupu	Výměna produktu nebo vrácení kupní ceny	
	Závažné poruchy již jednou vyměněného produktu	Vrácení kupní ceny	
	Pokud je nemožná výměna		
	Drobné závady	Oprava zdarma	
	Produkty byl 3x opraven a projevila se vždy stejná závada	Výměna produktu nebo vrácení kupní ceny	10% sleva k nákupu nového produktu
	Byly provedeny 4 různé opravy a projevila se pátá závada		
	Produkt je neopravitelný		
	K opravě nejsou k dispozici náhradní díly	Sleva 10% z ceny placené opravy	
	Záruční oprava nebyla provedena do 1 měsíce od uplatnění záruky		
Závada způsobená během dopravy produktu k zákazníkovi	Výměna produktu	-	

\* Vyše uvedené bezplatné záruční období a normy pro odszkodnění vycházejí ze standardů řešení spotřebitelských sporů

\* Pokud dojde ke sporu o nespécifikované záležitosti nebo předpisy, budou platit standardy řešení spotřebitelských sporů

\* Pokud výrobek nefunguje správně, mohou být účtovány servisní poplatky za služby, proto si prostudujte tuto uživatelskou příručku.

\* Díly, které mají být vyměněny během opravy, mohou být jiného původu nebo výrobce než stávající díly a nemusí být nové. Musí ale fungovat jako nové originální díly pro splnění bezproblémového provozu produktu. Některé díly mohou být vyrobeny v jiné zemi, než ve které byl vyroben kompletní produkt.

\* V případě požadavku výměny nebo vrácení peněz z důvodu vedlejších účinků je vyžadováno lékařské potvrzení.

Druh poškození		Detaily o kompenzaci	
		V záruční lhůtě	Po uplynutí záruční lhůty
Poškození z důvodu nedbalosti spotřebitele	Je-li opravitelný	Placená oprava	Placená oprava
	Není-li opravitelný	Placená výměna produktu	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>- V případě poruchy v důsledku přírodních katastrof (bouřka, plyn, zemětřesení, vítr, atd.)</li> <li>- V případě poruchy v důsledku abnormálního napájení nebo vadného připojení zařízení</li> <li>- V případě poruchy v důsledku opravy nebo úpravy v jiném než autorizovaném servisu</li> <li>- Při výměně spotřebních dílů, které se během používání opotřebují</li> <li>- V případě jiné příčiny poruchy, nikoli vady samotného produktu</li> </ul>		Placená oprava	Placená oprava

## Podmínky placených služeb

Při podávání žádosti o (i záruční) servis budou účtovány následující servisní úkony:

- 1) V případě poruchy způsobené vniknutím cizích látek (voda, nápoje, hračky, atd.) do výrobku.
- 2) V případě poškození produktu nebo selhání funkce v důsledku pádu nebo nárazu.
- 3) Pokud je vzhled poškozen nebo zdeformován organickými rozpouštědly, jako jsou ředidla nebo benzen.
- 4) Pokud dojde k poruše produktu v důsledku použití dílů nebo spotřebního materiálu, které nejsou originální, originální L.ma výrobky lze zakoupit v zákaznickém centru L.ma.
- 5) Pokud zákazník produkt rozebere a dojde ke ztrátě nebo poškození příslušenství.
- 6) V případě poruchy produktu v důsledku nesprávného elektrického napětí.
- 7) V případě, že dojde k poruše v důsledku opravy nebo úpravy produktu jinde než v autorizovaném servisu
- 8) V případě poruchy v důsledku přírodních katastrof
- 9) V případě selhání z důvodu nedodržení „preventivních opatření k produktu“ uvedených v této uživatelské příručce.
- 10) V případě selhání produktu z důvodu jiné nedbalosti zákazníka.